

# JSV-H1000

## 立式自動測試台

TLFT-JSV-H1000-1

### Automatic Handy Stand

- 特徴**
- ◎ 可充分活用拉力計(HANDY FORCE GAUGE)功能的伺服控制立式自動測試台。
  - ◎ 具有簡易使用的簡單模式、可預先設定測試的試驗條件的詳細模式，也可以設定保持時間、間隔時間，進行重複性的試驗。
  - ◎ 使用數位方式，可以正確且簡單的設定試驗速度、測試範圍。
  - ◎ 可以即時監看負荷的變化，不必擔心荷重元發生過負荷而損壞。
  - ◎ 測試結果可以傳送到電腦，經由 EXCEL 等軟體做資料處理。
  - ◎ 可選擇顯示日語、英語、國語、韓語四種語言。
  - ◎ 實現低價格、豐富的功能、操作簡單的需求。


Excel 是 Microsoft 的商標。

### 規格

名 稱	立式自動測試台
型 式	JSV-H1000
最大荷重	1000N (100kgf)
試驗速度	1 ~ 600 mm/min
試驗行程	250mm (包含治具尺寸)
工件空間	W220×D140mm
外型尺寸	W220×D340×H540
重 量	約 18 kg
電 源	AC100V ~ AC240V

\* 規格變更時不預先告知

### 桌面形狀尺寸

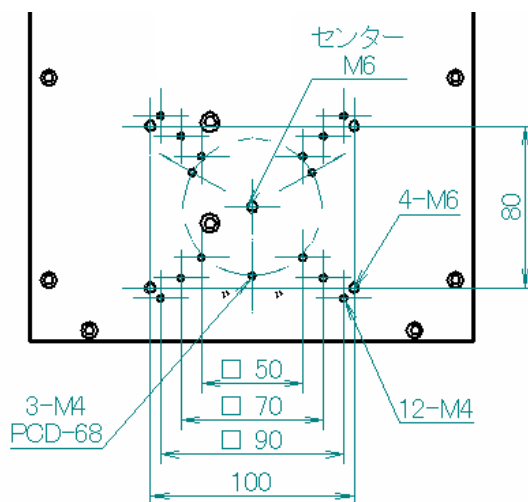

HANDY 及治具另售

# JISC

日本試験機工業会々員  
日本ばね機械工業会々員

## 日本計測システム株式会社

本社 TEL0744-48-8611 FAX0744-48-8618  
 東京 TEL03-3835-8131 FAX03-3835-8130  
 大阪 TEL0726-35-8545 FAX0726-35-8545  
<http://www.jisc-jp.com>  
 E-mail: sales@jisc-jp.com

2006.09  
Rev.2

## 資料處理系統

## JSV-H1000+HANDY

JSV-H 系列與 HANDY FORCE GAUGE 的組合可以執行高效率的荷重試驗

執行高效率的測試後，也需要有效率的將測試結果製作成報告。

使用 SOP-USB1、SOP-RS1 介面及 SOP-API 軟體可以很簡單的將資料傳送到 Excel 做報表處理。

Excel 是 Microsoft 公司的商標

## 主要機器設備及選配件

品名	型式	規格	備註
HANDY FORCE GAUGE	HF-1~50	荷重容量 10-500N 最小解析度 1/10000	
	HF-100	荷重容量 1000N 最小解析度 1/10000	
立式自動測試台	JSV-H1000	耐荷重 1kN	
RS232C 資料輸出套件將資料傳送至 Excel	SOP-RS1	⑤RS232C 連接線 RSR9-9 ⑥SOP-API 軟體組合	
USB 資料輸出套件將資料經 USB 送出	SOP-USB1	⑤⑥及⑦UC-232A 的組合 使用於無 RS232C 埠的電腦連接介面	
串列傳輸式印表機	SOP-PR1	CBM270RJ1 串列傳輸式印表機	
配件 工件置放台 監看相機 等.		③・④準備用於與工件配合之各種配件及工件置放台 依據所提供的試片樣品，選擇適合的現有治具，也可以設計與試片相配合的治具。	

## ①HANDY FORCE GAUGE

10N~1000N 共七種型號

## ②立式自動測試台 JSV-H1000

可簡單的設定各種相對應的測試條件。

## ③配件 (選配)

請選擇與試片相符合的配件。

## ④挾持治具 (選配)

請選擇與試片相符合的治具。


## ⑤與電腦連接的 RS-232C 連接線。

## ⑥將測試資料及荷重特性曲線傳送到 Excel 的軟體。

## ⑦使用於無 RS232C 埠的電腦連接線。

## ⑧可直接列印資料的印表機。

可連接 RS-232C 型式的迷你印表機式。

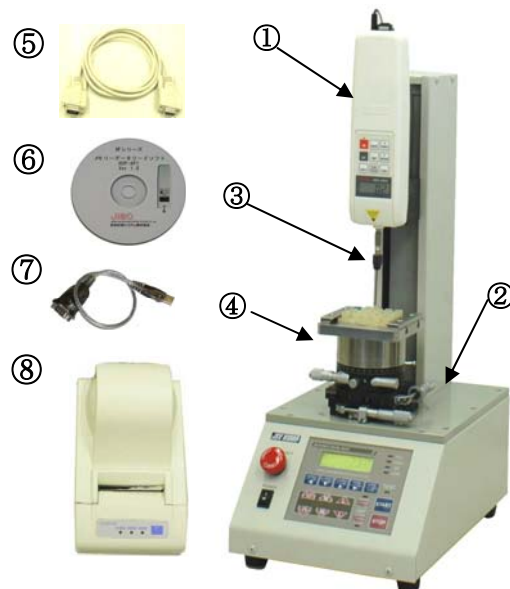

邁多科技 [www.YaLab.com.tw](http://www.YaLab.com.tw) 02-2389-0101